



Instrucciones de uso



Español

Corowell COVID-19 Symptom Screening Rapid Test

User Manual v1.0

MKG Consulting UG
Hauptstrasse 96
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Germany

Telephone: +49 2641 908 28 74
E-Mail: info@corowell.com

1 Uso previsto

El *Test de detección de síntomas Corowell COVID-19* tiene la finalidad de efectuar una comprobación objetiva del olfato.

Permite identificar a aquellas personas que hayan sufrido recientemente una variación, una limitación o la pérdida de olfato.

El *Test de detección de síntomas Corowell COVID-19* es un dispositivo para uso doméstico

El *Test de detección de síntomas Corowell COVID-19* puede autoadministrarlo el propio usuario.

Los destinatarios son adultos mayores de 18 años.

2 Contraindicaciones

El *Test de detección de síntomas Corowell COVID-19* está contraindicado en casos de alteración de la percepción olfativa previa, alteración a largo plazo o de tipo hereditario.

3 Instrucciones

Lea estas instrucciones antes de utilizar el *Test de detección de síntomas Corowell COVID-19* por primera vez.

3.1 Advertencias

- El *Test de detección de síntomas Corowell COVID-19* ha sido creado y probado para su uso por parte de un único usuario. No use el *Test de detección de síntomas Corowell COVID-19* junto con otras personas, hágalo solo. Sin embargo, puede utilizar la misma aplicación para hacer el test a varios usuarios consecutivamente.
- No guarde los tiques Corowell en las proximidades del agua o en lugares húmedos.

3.2 Precauciones

- El *Test de detección de síntomas Corowell COVID-19* únicamente debe usarse en entornos en los que no abunden olores intensos, para que el usuario pueda detectar fácilmente y sin distracciones los olores del tique Corowell.
- El *Test de detección de síntomas Corowell COVID-19* únicamente debe usarse si el usuario dispone de una conexión a Internet que funcione correctamente.

4 Funciones generales

El *Test de detección de síntomas Corowell COVID-19* está diseñado para ayudar al usuario durante el proceso, de modo que pueda realizar las pruebas en casa o en su entorno laboral.

El sistema del *Test de detección de síntomas Corowell COVID-19* consta de

- la aplicación Corowell (para iOS y Android)
- Corowell Ticket



Figura 1 - Corowell COVID-19 Symptom Screening Test System Components

5 Uso del sistema Corowell

Los siguientes apartados describen en detalle el uso del sistema Corowell.

5.1 Cargar el software de la aplicación por primera vez

Para descargar por primera vez el software de la aplicación en el smartphone, el usuario tiene la posibilidad de:

Hacer la búsqueda de Corowell en la correspondiente App Store o en Google Store y descargar e instalar la aplicación

En el dorso del tique Corowell, escanear el código QR como se indica en la Figura 2. De este modo, el usuario será redirigido a la App Store y podrá descargar e instalar el software de la aplicación sin tener que buscarlo.

Scan this QR Code to download the App



Figura 2

5.2 Pantallas de inicio

Al abrir el test de detección por primera vez, aparecerán las siguientes pantallas introductorias. Únicamente aparecerán cuando abra la aplicación por primera vez (Figura 3).

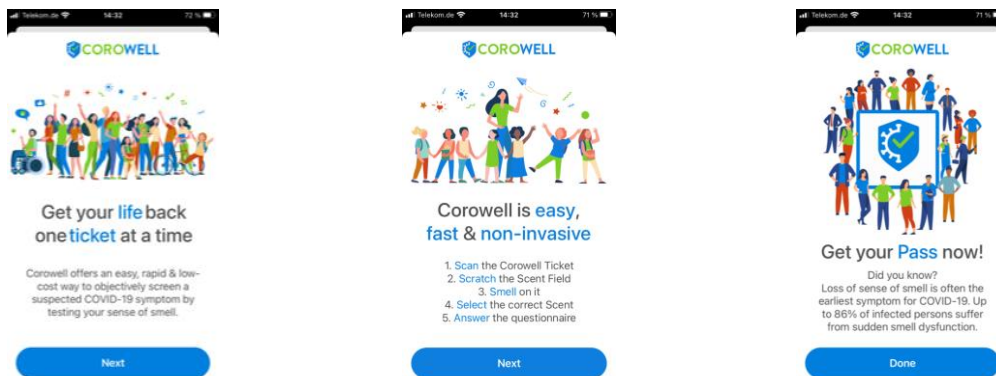


Figura 3

5.3 Pantalla de escaneo de tiques

Después de las pantallas de inicio, aparecerá la pantalla de escaneo del tique. Antes que nada, autorice a la aplicación que acceda a su cámara (Figura 4).

5.4 Selección del idioma

Al iniciar la Corowell App por primera vez, el software adoptará automáticamente el idioma seleccionado por defecto en su smartphone. Puede modificarlo en cualquier momento en los ajustes (Figura 4).

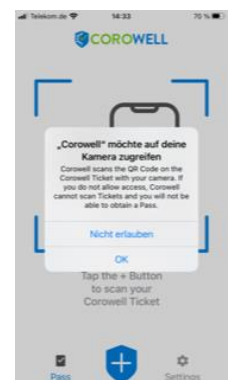


Figura 4

5.5 Escaneo de tiques

Cada vez que escanee un nuevo tique debe abrir primero el tique, que está adherido, y escanear el código QR de su interior empleando la aplicación (Figura 5). Para hacerlo, simplemente presione el signo + de la cresta azul, en la parte inferior de la pantalla de escaneo de tiques (Figura 6).



Figura 5

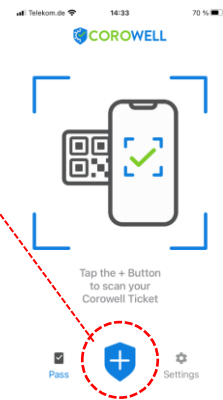


Figura 6

5.6 Pantalla de selección de aromas

Después de haber escaneado el código QR del interior del tique, se abrirá la pantalla de selección de aromas (Figura 7). En la misma, seleccione el aroma que haya detectado en la zona de aroma, de color verde (Figura 5), una vez la haya rascado con la uña o con una moneda. A continuación, haga clic en «Confirmar», en la parte inferior de la pantalla (Figura 7)..

A continuación, haga clic en «Confirmar», en la parte inferior de la pantalla (Figura 7).

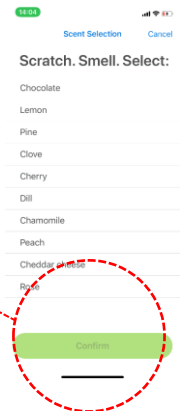


Figura 7

5.7 Pantalla del cuestionario de COVID-19

En esta pantalla debe responder con sinceridad a TODAS las preguntas, que son siete (7) (Figura 8). Únicamente cuando haya respondido SÍ o NO a TODAS ellas y el control deslizante se haya movido, podrá continuar haciendo clic en «Confirmar».

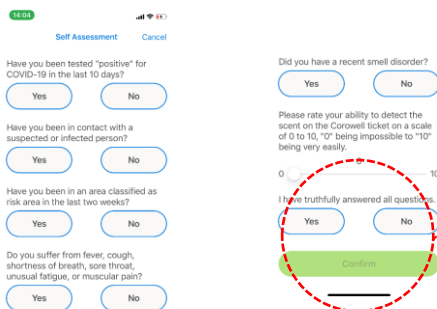


Figura 8

5.8 Introducción del nombre y protección de datos

A continuación, la pantalla se abre como indica la Figura 9. Introduzca su nombre (o el nombre de la persona que haya hecho el test, por ejemplo, su hijo).

Esto es muy importante, puesto que más tarde, cuando presente su RESULTADO SATISFACTORIO de Corowell para la verificación por parte de terceros, es posible que se le pregunte por la identificación para confirmar la identidad.

Debe aceptar asimismo la declaración de protección de datos, que podrá leer con calma en todo momento en el enlace (Figura 9) o en los ajustes.

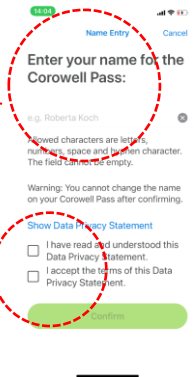


Figura 9

5.9 Pantalla PASS de Corowell


Si ha superado el *Test de detección de síntomas Corowell COVID-19*, se abrirá la pantalla de RESULTADO SATISFACTORIO de Corowell (Figura 10). Aquí verá el nombre que introdujo anteriormente y la fecha y la hora en que realizó el test. Estos datos de fecha y hora serán relevantes en el momento en que esa tercera persona verifique su RESULTADO SATISFACTORIO de Corowell.

Los operadores de hoteles, restaurantes, líneas aéreas, etc. únicamente aceptarán pases Corowell de no más de 6, 12, 24, 48 o 72 horas de antigüedad. Estos criterios de aceptación se le comunicarán en el acto.



Figura 10

5.10 Corowell FALLÓ la pantalla

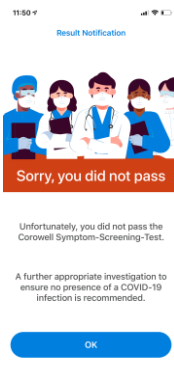

Si no ha superado el test de Corowell, aparecerá esta pantalla. Si tiene la impresión de que solo ha hecho algo mal, siempre podrá repetir el test con un tique nuevo. Si realmente no puede oler, o si respondió SÍ a cualquiera de las 5 primeras preguntas o NO a la última pregunta, le recomendamos que lo examine un profesional sanitario para detectar la posible infección por COVID-19.

6 Mensaje de error «Lamentablemente no podemos procesar su tique»

Esta pantalla (Figura 11) aparecerá cuando intente emplear un tique por segunda vez o bien si dispone de una copia o de una falsificación del tique original de Corowell.

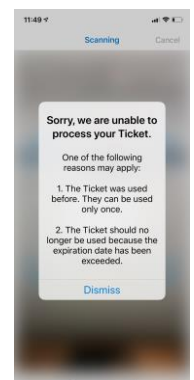


Figura 11

7 Ajustes

En los ajustes (Figura 12) podrá abrir estas instrucciones y leer las preguntas frecuentes.

Aquí también encontrará la declaración de protección de datos (en su idioma) y podrá acceder a la web corowell.com.

En el campo «Acerca de...» del dispositivo médico oficial encontrará información de nuestro producto (Figura 13).

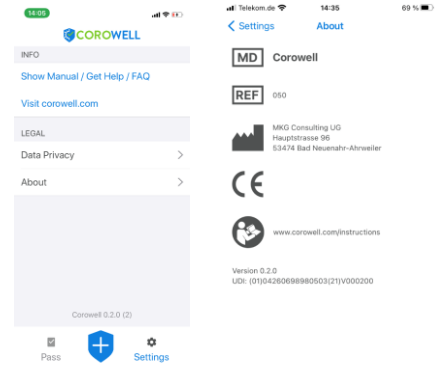


Figura 12

Figura 13

8 Asistencia y garantía




Nuestra garantía le ofrece una protección completa que entra en vigor a la fecha de su compra. Pida al vendedor que le informe de los detalles y del periodo de garantía. Esta garantía cubrirá todos los defectos de materiales y/o de mano de obra.

La garantía no cubrirá los daños originados por un uso o cuidado inadecuados, la exposición a productos químicos, la inmersión en el agua o una exposición inadecuada. Los daños causados por terceros o por parte de centros de asistencia técnica no autorizados anularán dicha garantía.

9 Símbolos



Se utilizan varios símbolos en la información anterior. Estos se explican a continuación:

	Producto sanitario, por sus siglas en inglés
	Número de referencia
	Número de serie
	Fecha de fabricación
	Fabricante
	Manténgase en lugar seco
	Dispositivo de un solo uso
	Protéjase de la luz solar
	Restricciones de temperatura
	Véase el manual de
	Marcado de conformidad europea