



Gebbruksinstructies



Nederlands

Corowell COVID-19 Symptom Screening Rapid Test

User Manual v1.0

MKG Consulting UG
Hauptstrasse 96
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Germany

Telephone: +49 2641 908 28 74
E-Mail: info@corowell.com

1 Beoogd gebruik

De *Corowell COVID-19 Symptoom-screeningtest* is bedoeld om het reukvermogen op een objectieve manier te testen. Het maakt de identificatie mogelijk van personen van wie de reukwaarneming afwijkt, beperkt is, of recent verloren is gegaan.

De *Corowell COVID-19 Symptoom-screeningtest* heeft de vorm van een hulpmiddel voor thuisgebruik.

De *Corowell COVID-19 Symptoom-screeningtest* kan door de betreffende persoon zelf worden uitgevoerd.

De doelgroep wordt gevormd door volwassen personen, ouder dan 18 jaar.

2 Contra-indicaties

De *Corowell COVID-19 Symptoom-screeningtest* is gecontra-indiceerd voor personen met erfelijke, reeds bestaande of al langdurig verminderde reukwaarneming.

3 Instructies

Lees a.u.b. deze handleiding voordat u de *Corowell COVID-19 Symptoom-screeningtest* voor de eerste keer gebruikt.

3.1 Waarschuwingen

- De *Corowell COVID-19 Symptoom-screeningtest* is ontwikkeld en getest voor toepassing door één enkele gebruiker. Gebruik de *Corowell COVID-19 Symptoom-screeningtest* niet samen met andere mensen, maar uitsluitend alleen. U kunt echter wel dezelfde app gebruiken om meerdere gebruikers achter elkaar te testen.
- Bewaar de Corowell-kaarten niet in de buurt van water of op vochtige plaatsen.

3.2 Voorzorgsmaatregelen

- De *Corowell COVID-19 Symptoom-screeningtest* mag alleen worden gebruikt in een omgeving waarin weinig sterke geuren aanwezig zijn, zodat de gebruiker de geuren op de Corowell-kaart gemakkelijk kan waarnemen, zonder afgeleid te worden.
- De *Corowell COVID-19 Symptoom-screeningtest* mag alleen worden gebruikt als de gebruiker een werkende internetverbinding heeft.

4 Algemene functies

Het *Corowell COVID-19 Symptoomscreening testsysteem* is ontworpen om de gebruiker tijdens het proces te ondersteunen, zodat de gebruiker thuis of elders met succes een test kan afnemen.

Het *Corowell COVID-19 Symptoomscreening testsysteem* is ontworpen om de gebruiker tijdens het proces te ondersteunen, zodat de gebruiker thuis of elders met succes een test kan afnemen

- Corowell App (iOS en Android)
- Corowell Ticket



Figuur 1 - Corowell COVID-19 Symptom Screening Test System Components

5 Het Corowell-systeem gebruiken

Het gedetailleerde gebruik van het Corowell-systeem wordt beschreven in de volgende hoofdstukken.

5.1 De app-software voor de eerste keer laden

Om de app-software voor de eerste keer naar de smartphone van de gebruiker te downloaden, kan de gebruiker zoeken naar Corowell in respectievelijk de App Store of de Google Store en van daaruit de app downloaden en installeren.

Scan de QR-code op de achterzijde van de Corowell-kaart, zoals weergegeven in Figuur 2. Van daaruit wordt de gebruiker doorgeleid naar de App Store waar de app-software kan worden gedownload en geïnstalleerd, zonder te hoeven zoeken.


Scan deze QR-code om de app te downloaden



Figuur 2

5.2 Startschermen

Als u de test voor de eerste keer opent, ziet u de volgende schermen, die dienen als introductie van de screeningtest. Ze verschijnen alleen de eerste keer dat de app wordt geopend en later niet meer (Figuur 3).

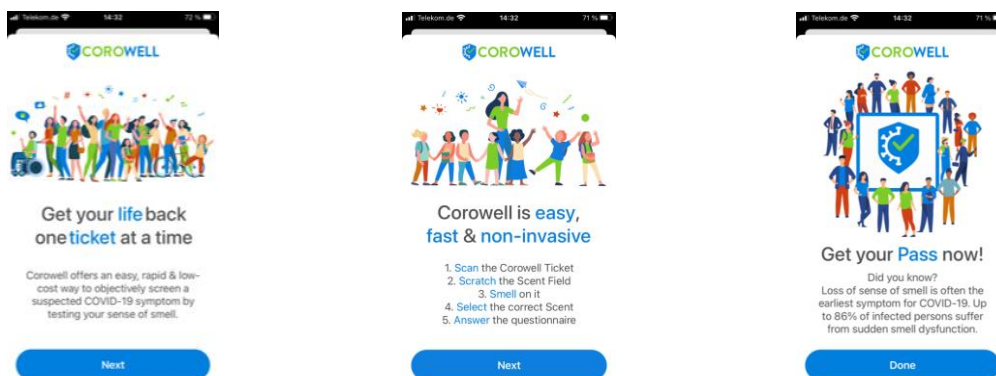


Figuur 3

5.3 Scanscherm voor de kaarten

Na de startschermen verschijnt het "Scanscherm voor de kaarten". Eerst moet u de app nog toegang geven tot uw camera (Figuur 4).

5.4 Selecteer taal

Als u de Corowell-app voor de eerste keer start, neemt de software automatisch de taalkeuze over die is ingesteld op uw smartphone. U kunt dit op elk moment wijzigen in de instellingen (Figuur 4).

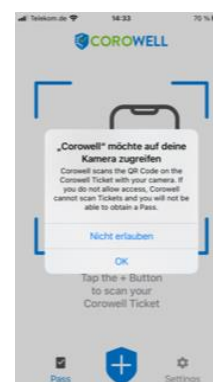

Figuur 4

5.5 Kaart scannen

Elke keer dat u een nieuwe kaart scant, moet u eerst de dichtgeplakte kaart voorzichtig openen en vervolgens met de app de QR-code aan de binnenkant scannen (Figuur 5). Voor dat laatste drukt u eenvoudig op het "+" teken in het blauwe vlakje onder in het scanscherm voor de kaarten (Figuur 6).



Figuur 5



Figuur 6


5.6 Geurkeuze-scherm

Nadat u de QR-code aan de binnenkant van de kaart heeft gescand, wordt het Geurkeuze-scherm geopend (Figuur 7). Daar moet u de geur aangeven die u heeft geroken nadat u met uw vingernagel of een muntstuk over het groene geurgebied (Figuur 5) heeft gekrast.


Klik vervolgens op "Bevestigen" onderaan het scherm (Figuur 7).

5.7 Scherm met COVID-19 vragenlijst

Hier moeten de zeven (7) vragen ALLEMAAL naar waarheid worden beantwoord (Figuur 8). Alleen als u op ALLE vragen JA of NEE heeft geantwoord en de schuifregelaar dienovereenkomstig is aangepast, kunt u doorgaan, door te klikken op Bevestigen..

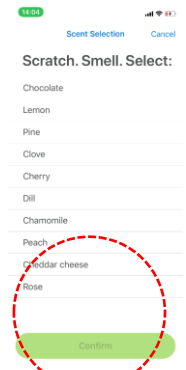

Figuur 7

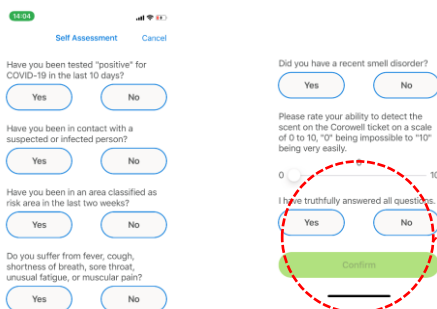


Figuur 8

5.8 Voer naam en gegevensprivacy in

Vervolgens wordt het scherm geopend zoals weergegeven in Figuur 9. Hier moet u uw naam invoeren (of de naam van de persoon die de test daadwerkelijk heeft afgelegd, bijvoorbeeld uw kinderen).

Dit is erg belangrijk omdat later, als u uw Corowell-PAS voor verificatie aanbiedt, door derden mogelijk om een ID kan worden gevraagd ter bevestiging van de identiteit.

U dient ook het privacybeleid te accepteren, dat u op elk moment in detail kunt lezen via de link (Figuur 9) of in de Instellingen.

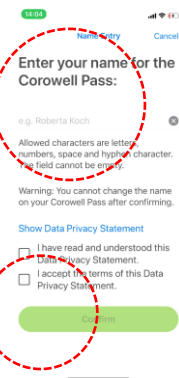

Figuur 9

5.9 Scherm Corowell GESLAAGD


Nadat u voor de Corowell COVID-19 Symptoomscreeningstest bent "geslaagd", opent zich het scherm van Corowell-PAS (Figuur 10). Daar ziet u de naam die u eerder heeft ingevoerd, plus de datum en het tijdstip waarop u de test heeft gedaan. Dit is nodig, omdat als uw Corowell-PAS door een derde partij wordt beoordeeld, de tijd en datum waarop u slaagde van belang is.

Beheerders van hotels, restaurants, luchtvaartmaatschappijen, enz. accepteren alleen Corowell PAS, die niet ouder zijn dan 6, 12, 24, 48 of 72 uur. Deze acceptatiecriteria worden ter plaatse aan u meegedeeld



Figuur 10


5.10 Scherm Corowell MISLUKT

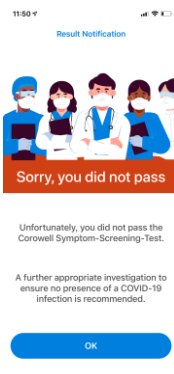

Als u niet slaagt voor de Corowell-test, verschijnt dit scherm. Als u de indruk heeft dat u "alleen maar" iets fout heeft gedaan, kunt u de test altijd herhalen met een nieuwe kaart. Als u echt niets ruikt, of als u op een van de eerste 5 vragen JA heeft geantwoord, of NEE op de laatste vraag, dan raden we u aan om u door een zorgverlener te laten onderzoeken op een mogelijke COVID-19-infectie.

6 Foutmelding "Sorry, we kunnen uw kaart niet verwerken"

Dit scherm (Figuur 11) verschijnt als u uw kaart voor een tweede keer probeert te gebruiken, of als u een kopie of een valse Corowell-kaart heeft.

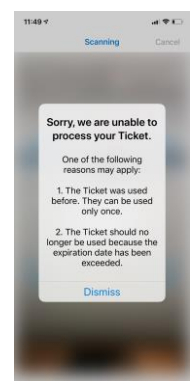


Figuur 11

7 Instellingen


In de Instellingen (Figuur 12) kunt u deze gebruiksinstructies openen en de veel gestelde vragen lezen.

Hier vindt u ook het privacybeleid (in uw taal) en kunt u onze website corowell.com bezoeken.

In het veld "Over" het officiële medische hulpmiddel vindt u informatie over ons product (Figuur 13).

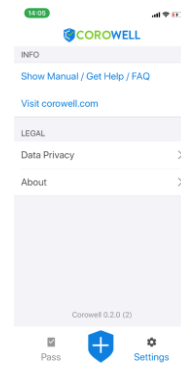

Figuur 12

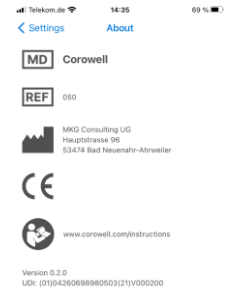

Figuur 13

8 Service en garantie












We bieden u een uitgebreide, wereldwijde garantie, die ingaat op de aankoopdatum. Vraag uw aanbieder naar details en de garantieperiode. Deze garantie dekt alle materiaal- en/of fabricagefouten.

De garantie dekt geen schade als gevolg van onjuist gebruik of onderhoud, blootstelling aan chemicaliën, onderdompeling in water of onjuiste blootstelling. Bij schade, veroorzaakt door derden of niet-geautoriseerde servicecentra vervalt de garantie.

9 Symbolen

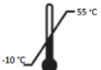

In de bovenstaande informatie worden verschillende symbolen gebruikt. Deze worden hieronder uitgelegd:

	Medisch hulpmiddel
	Referentienummer
	Serienummer
	Productiedatum
	Producent
	Droog bewaren
	Hulpmiddel voor eenmalig gebruik
	Beschermen tegen zonlicht
	Temperatuurgrenzen
	Zie gebruiksinstructies
	Conformiteitsmerk van de Europese Gemeenschap