



تعليمات الاستخدام



العربية

تطبيق Corowell Guard

دليل الاستخدام v1.0

MKG Consulting UG
Hauptstrasse 96
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Germany

رقم الهاتف: +49 2641 908 28 74
الايمل: info@corowell.com

1. استخدام تطبيق الـ Guard

يستخدم تطبيق Corowell Guard لتحقيق وتوثيق التصاريح الإلكترونية الصادرة عن تطبيق Corowell من خلال قراءة رمز الاستجابة السريعة (QR-code) الخاص بالتصريح الإلكتروني.



2. الموانع

- لا شيء

3. التعليمات

يرجى قراءة هذا الدليل قبل استخدام تطبيق Corowell Guard للمرة الأولى.

3.1. التحذيرات

- لا شيء


4. الاحتياطات

- لا شيء

5. وظائف عامة

تم تصميم تطبيق Corowell Guard لدعم المستخدم أثناء جميع الإجراءات حتى يتمكن المستخدم من التحقق بنجاح وتوثيق التصاريح الإلكترونية الصادرة عن تطبيق Corowell.

يتكون تطبيق Corowell Guard (iOS و Android) من الشاشات التالية. يوفر الشكل 1 نظرة عامة على مكونات نظام Corowell للاختبار السريع للأعراض.

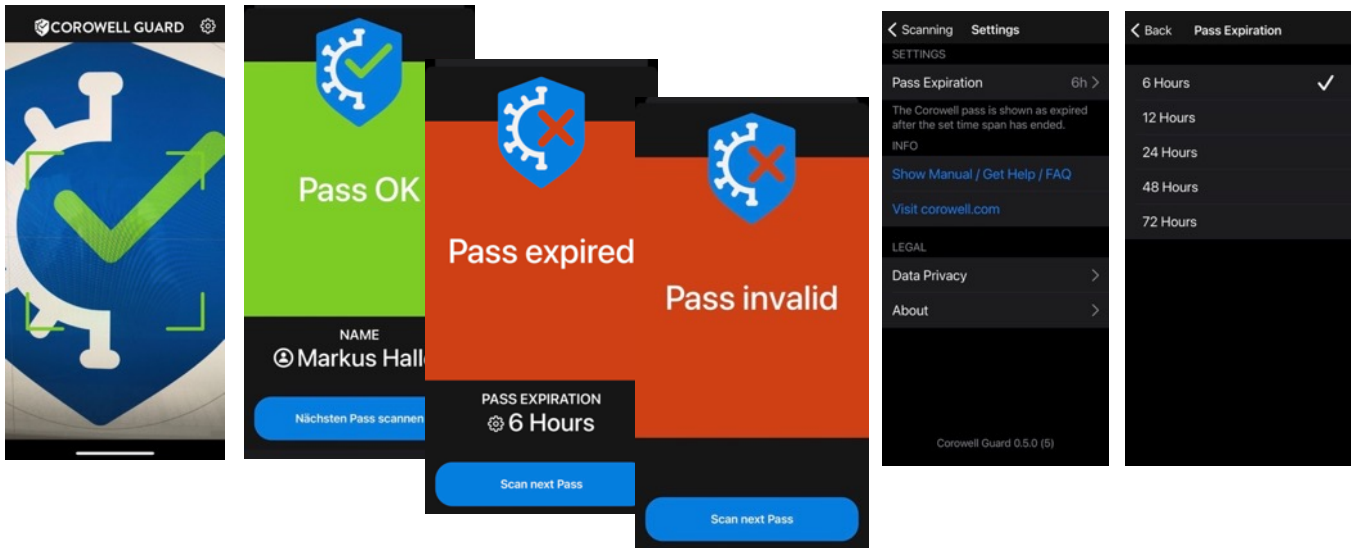

شاشات تطبيق Corowell Guard


6. استخدام تطبيق Corowell Guard

تم وصف الاستخدام التفصيلي لنظام Corowell في الفصول التالية.


6.1. شاشات المسح للتصريح الإلكتروني

عند فتح تطبيق Corowell Guard، يقبل المستخدم للسماح بـ "الوصول الى الكاميرا"، بحيث تكون الكاميرا نشطة على الفور لمسح تصاريح Corowell.


بمجرد مسح التصريح، سيتحقق التطبيق من صلاحية وصحة التصريح وسيوفر واحدة من 3 شاشات "النتيجة" (انظر أدناه في الشكل 2a "Pass OK"، 2b "Pass Expired" مع بيان فترة صلاحية المحددة مسبقًا و 2c "Pass Invalid" ما يشير إلى تصريح غير صالح أو منسوخ أو غير أصلي).

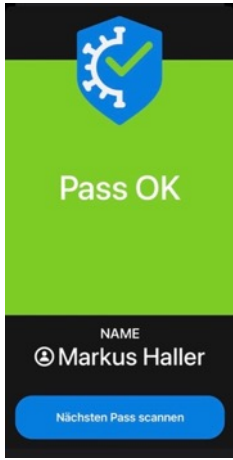

الشكل 2a

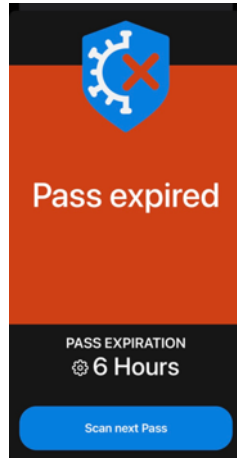

الشكل 2b

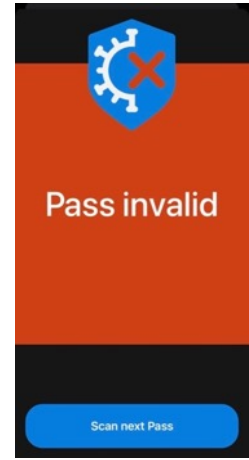

الشكل 2c

6.2 اختيار اللغة

يتم ضبط لغة تطبيق Corowell تلقائيًا على لغة إعدادات الهاتف الذكي. إذا كان إعداد الهاتف الذكي قد حدد لغة غير متوفرة في التطبيق ، فإن اللغة الافتراضية هي الإنجليزية.


6.3 الإعدادات

في الإعدادات (الشكل 3) يمكنك فتح هذا الدليل وكذلك قراءة الأسئلة الشائعة.

ستجد هنا أيضًا سياسة الخصوصية (بلغتك الخاصة) ويمكنك زيارة موقع الويب corowell.com الخاص بنا.

في الحقل "حول"، ستجد معلومات الجهاز الطبي الرسمية حول منتجنا (الشكل 3).

يمكنك أيضًا تعيين مدة إنتهاء صلاحية التصريح ، والتي تريد قبولها منذ أن تم إصدار للمستخدم تصريح Corowell Pass الإلكتروني.

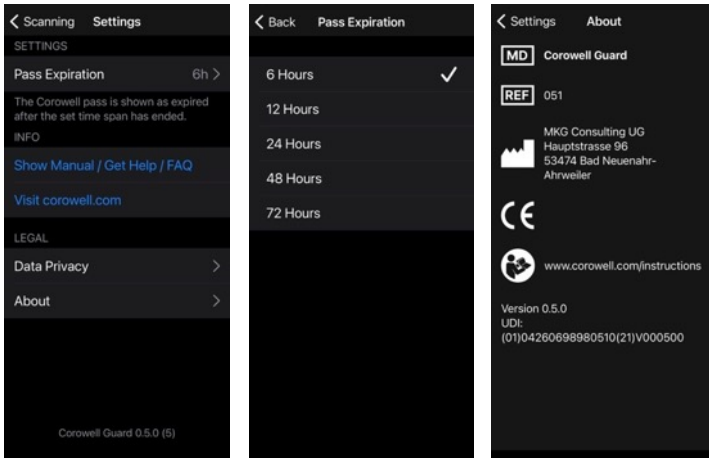

الشكل 3

7. الخدمة والضمان

نحن نقدم لك حماية ضمان عالمي شاملة تدخل حيز التنفيذ في تاريخ الشراء. يرجى سؤال البائع للحصول على التفاصيل وفترة الضمان. يغطي هذا الضمان جميع عيوب المواد و / أو التصنيع.

لا يغطي الضمان الضرر الناتج عن الاستخدام غير الصحيح أو العناية أو التعرض للمواد الكيميائية أو الغمر في الماء أو التعرض غير المناسب. الأضرار التي تسببها أطراف ثالثة أو مراكز الخدمة غير المصرح بها سوف تبطل الضمان.

8. الرموز

يتم استخدام رموز مختلفة في المعلومات الواردة أعلاه. هذه من بين ما هو موضح أدناه:

	اسم النموذج
	رقم المرجع
	الرقم السري
	تاريخ التصنيع
	الصانع
	الحفاظ على الجفاف
	جهاز يستخدم مرة واحدة
	حماية من اشعة الشمس
Thermometer	حدود درجة الحرارة
	انظر دليل المستخدم
CE	شهادة علامة CE