



Gebruiksaanstructies



Nederlands

Corowell Guard App

User Manual v1.0

MKG Consulting UG
Hauptstraße 96
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Germany

Telefon: +49 2641 908 28 74
E-Mail: info@corowell.com

1 Het gebruik van de Guard-app

De Corowell Guard-app wordt gebruikt voor het verifiëren en valideren van de door Corowell uitgegeven Passen, door middel van het lezen van de QR-code van de elektronische pas.

2 Contra Indicaties

- Geen

3 Instructies

Leest u deze handleiding a.u.b. voordat u de Corowell Guard-app voor de eerste keer gaat gebruiken.

3.1 Waarschuwingen

- Geen


4 Voorzorgsmaatregelen

- Geen

5 Algemene functies

De Corowell Guard-app is ontwikkeld om de gebruiker te ondersteunen tijdens alle processen, zodat deze in staat is om met succes elektronische Passen die door de Corowell-app zijn uitgegeven te verifiëren en te valideren.

De Corowell Guard-app (iOS en Android) bestaat uit de volgende schermen. Figuur 1 geeft een overzicht van de componenten van het Corowell Symptoom-snelteststelsel

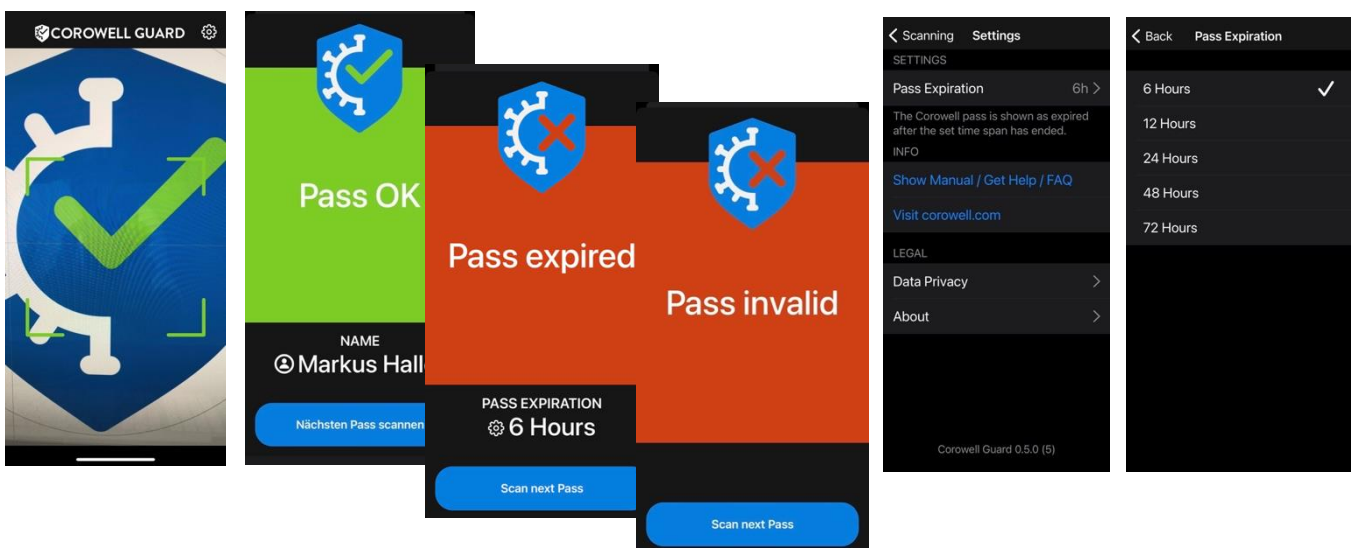

Figuur 1 - Corowell Guard App Screens


6 Het gebruik van de Corowell Guard-app

Het gedetailleerde gebruik van het Corowell-systeem wordt beschreven in de volgende hoofdstukken.


6.1 Electronic Pass Scanning Screen

Door het openen van de Corowell Guard-app, accepteert de gebruiker de "toegangscamera", zodat deze onmiddellijk actief is om Corowell-passen te scannen.


Zodra een Pas is gescand, controleert de app de geldigheid en authenticiteit van de Pas en wordt één van de 3 "resultaat"-schermen weergegeven (zie hieronder in Figuur 2a "Pas OK", 2b "Pas verlopen" met vermelding van de geldigheidsperiode en 2c "Pas ongeldig" wat wijst op een ongeldige, gekopieerde of niet-authentieke pas).

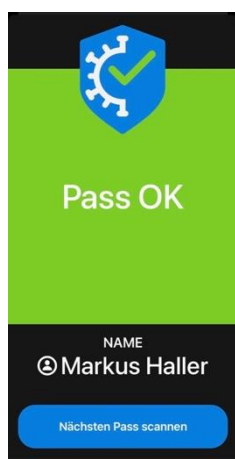

Figuur 2a

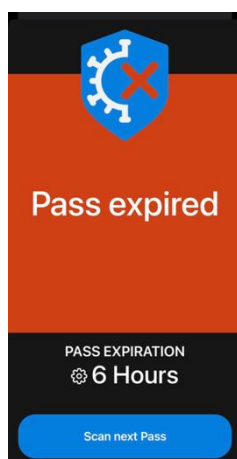

Figuur 2b

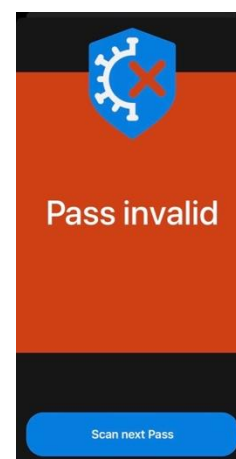

Figuur 2c

6.2 Kies taal

De taal van de Corowell Guard-app wordt automatisch ingesteld op de taal van de instellingen van de smartphone. Is in de smartphone-instellingen een taal geselecteerd die niet beschikbaar is in de app, dan is de standaardtaal Engels.


6.3 Instellingen

In de Instellingen (Figuur 3) kunt u deze handleiding openen en de veel gestelde vragen lezen.

Hier vindt u ook het privacybeleid (in uw taal) en kunt u onze website corowell.com bezoeken.

In het veld "Over" het officiële medische hulpmiddel vindt u informatie over ons product (Figuur 3).

U kunt ook de vervaltermijn van de pas instellen, tot welk moment u hem wilt accepteren vanaf het moment dat een gebruiker zijn elektronische Corowell-pas heeft ontvangen.

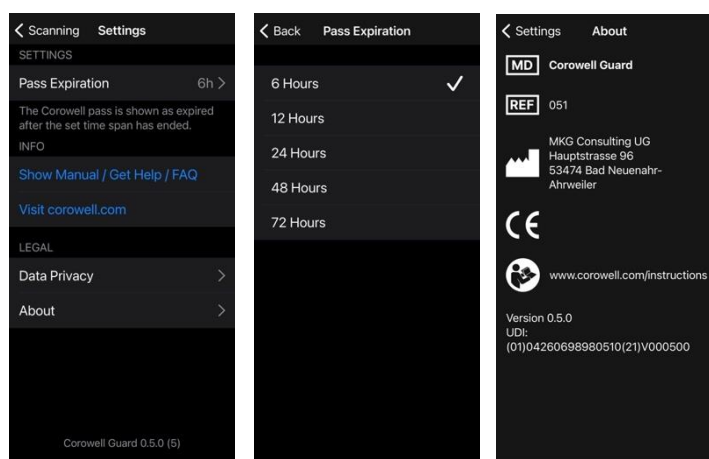


Figuur 3

7 Service en garantie

We bieden u een uitgebreide, wereldwijde garantie, die ingaat op de aankoopdatum. Vraag uw aanbieder naar details en de garantieperiode. Deze garantie dekt alle materiaal- en/of fabricagefouten. De garantie dekt geen schade als gevolg van onjuist gebruik of onderhoud, blootstelling aan chemicaliën, onderdompeling in water of onjuiste blootstelling. Bij schade, veroorzaakt door derden of niet-geautoriseerde servicecentra, vervalt de garantie.

8 Symbols

De volgende symbolen worden gebruikt, hieronder in detail uitgelegd.

	Medisch hulpmiddel
	Referentienummer
	Serienummer
	Productiedatum
	Producent
	Droog bewaren
	Hulpmiddel voor eenmalig gebruik
	Beschermen tegen zonlicht
	Temperatuurgrenzen
	Zie gebruiksinstructies
	Conformiteitsmerk van de Europese Gemeenschap