



استعمال کے لئے ہدایات



اردو

Corowell COVID-19 Symptom Screening Rapid Test

User Manual v1.0

MKG Consulting UG
Hauptstrasse 96
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Germany

Telephone: +49 2641 908 28 74
E-Mail: info@corowell.com

1 مطلوبہ استعمال

- Corowell کوویڈ-19 علامت اسکریننگ ٹیسٹ کا مقصد سونگھنے کے احساس کا معروضی طور پر ٹیسٹ کرنا ہے۔ یہ ان مریضوں کی شناخت کے قابل بناتا ہے جن کا قوت شامہ کا ادراک انحراف کر رہا ہے، محدود یا نئی بات گمشدہ ہو چکا ہے۔
- کورویل کوویڈ-19 علامت اسکریننگ ٹیسٹ گھریلو استعمال کے لئے ایک آلہ ہے۔
- کورویل کوویڈ-19 علامت اسکریننگ ٹیسٹ مریض کی جانب سے خود سے منظم کیا جا سکتا ہے۔
- ہدف آبادی 18 سال سے زیادہ عمر کے افراد ہیں۔

2 برخلاف اشارے

- Corowell کوویڈ-19 علامت اسکریننگ ٹیسٹ موروثی، پہلے سے موجود یا طویل مدتی خراب ہونے والے قوت شامہ کے ادراک کے حامل مریضوں کے لئے برعکس اشاروں کا حامل ہے۔

3 ہدایات

- پہلی بار Corowell کوویڈ-19 علامت اسکریننگ ٹیسٹ استعمال کرنے سے پہلے برائے مہربانی اس کتابچہ کو پڑھ لیں۔

3.1 انتباہات

- کورویل کوویڈ-19 علامات اسکریننگ ٹیسٹ کو صرف ایک سنگل صارف کے استعمال کے لئے تیار اور ٹیسٹ کیا گیا ہے۔ کورویل کوویڈ-19 علامات اسکریننگ ٹیسٹ کو دوسرے افراد کے ساتھ استعمال نہ کریں، بلکہ صرف اکیلے ہی۔ تاہم، آپ ایک قطار میں متعدد صارفین کا ٹیسٹ کرنے کے لئے اسی ایپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔
- برائے مہربانی کورویل ٹکٹس کو پانی کے قریب یا نمدار جگہوں پر اسٹور نہ کریں۔

3.2 احتیاطی تدابیر

- Corowell کوویڈ-19 علامت اسکریننگ ٹیسٹ کو صرف ایسے ماحول میں استعمال کیا جانا چاہئے جہاں صرف چند ہی مستحکم بو/مہک ہو تاکہ صارف آسانی سے اور نہ کہ توجہ ہٹا کر کورویل ٹکٹ پر مہک کا پتہ لگا سکے۔
- Corowell کوویڈ-19 علامت اسکریننگ ٹیسٹ صرف اس صورت میں استعمال کیا جانا چاہئے، اگر صارف کے پاس کام کرتا ہوا انٹرنیٹ کنکشن ہے۔

4 عمومی افعال

- Corowell کوویڈ-19 علامت اسکریننگ ٹیسٹ سسٹم کو پراسیس کے دوران صارف کی معاونت کے لئے بنایا گیا ہے تاکہ صارف گھر پر یا فیلڈ میں کامیابی کے ساتھ ٹیسٹ کر سکے۔

کورویل کوویڈ-19 علامت اسکریننگ ٹیسٹ سسٹم ذیل پر مشتمل ہے

- Corowell ایپلیکیشن (iOS اور اینڈرائیڈ)
- Corowell ٹکٹ



Figure 1 - Corowell COVID-19 Symptom Screening Test System Components

5 کورویل سسٹم کا استعمال

- کورویل سسٹم کے تفصیلی استعمال کو مندرجہ ذیل ابواب میں بیان کیا گیا ہے۔

5.1 ایپ سافٹ ویئر کو پہلی بار لوڈ کرنا

ایپ سافٹ ویئر کو صارف کے اسمارٹ فون پر پہلی مرتبہ ڈاؤن لوڈ کرنے کے لئے، صارف یہ کر سکتا ہے متعلقہ ایپ اسٹور / گوگل اسٹور میں Corowell تلاش کریں اور وہاں سے ایپ کو ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کریں Corowell ٹکٹ کے پچھلے حصے پر، شکل 2 میں دکھائے گئے کے مطابق QR کوڈ اسکین کریں۔ وہاں سے، صارف کو ایپ اسٹور کی طرف ہدایت دی جاتی ہے اور وہ تلاش کیے بغیر ایپ سافٹ ویئر کو ڈاؤن لوڈ اور انسٹال کر سکتے ہیں۔


Scan this QR Code to download the App



شکل 2

5.2 سٹارٹ اسکرین

جب آپ پہلی بار ٹیسٹ کھولتے ہیں، تو مندرجہ ذیل اسکرینیں نمودار ہوتی ہیں، جو اسکریننگ ٹیسٹ کا ایک تعارف پیش کرتی ہیں۔ وہ صرف اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب ایپ پہلی بار کھولی جاتی ہے اور نہ کہ بعد میں (شکل 3)۔

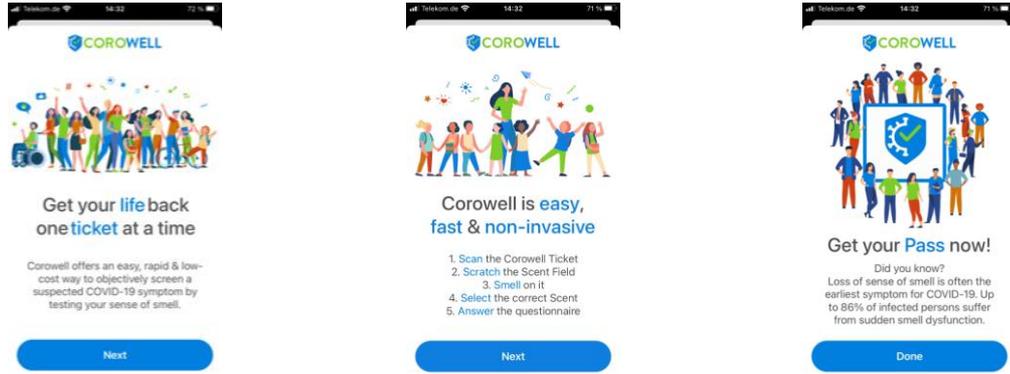


شکل 3

5.3 ٹکٹ اسکیننگ اسکرین

شروع کی اسکرینوں کے بعد "ٹکٹ اسکیننگ اسکرین" ظاہر ہوتی ہے۔ پہلے آپ نے ایپ کو اپنے کیمرے تک رسائی کی اجازت دینی ہوگی (شکل 4)۔

5.4 زبان منتخب کریں

جب آپ کورویل ایپ کو پہلی بار شروع کرتے ہیں، تو سافٹ ویئر خود بخود آپ کے اسمارٹ فون میں سیٹ شدہ زبان کے انتخاب کی اسکرین کو اختیار کر لیتا ہے۔ آپ اسے کسی بھی وقت ترتیبات میں سے تبدیل کر سکتے ہیں (شکل 4)۔

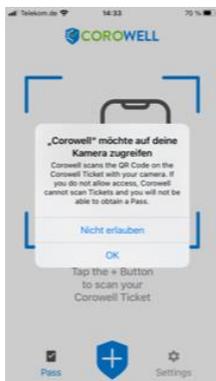


شکل 4

5.5 ٹکٹ اسکریننگ

ہر مرتبہ ایک نیا ٹکٹ اسکرین کرنے کے لئے، آپ کو سب سے پہلے احتیاط سے چپکے ہوئے ٹکٹ کو کھولنا ہوگا اور پھر ایپ کا استعمال کرتے ہوئے اندر سے QR کوڈ اسکرین کرنا ہوگا (شکل 5)۔ ایسا کرنے کے لئے، ٹکٹ اسکریننگ اسکرین کے نچلے حصے میں نیلے کرسٹ میں "+" علامت دبائیں (شکل 6)۔



شکل 5

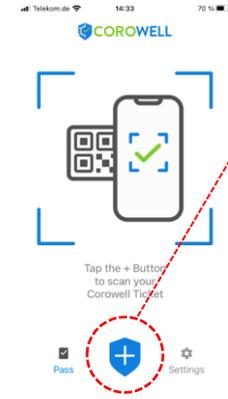

شکل 6

5.6 خوشبو اسکرین منتخب کریں

آپ کے ٹکٹ کی اندرونی طرف کے QR کوڈ اسکرین کرنے کے بعد، خوشبو کے انتخاب کی اسکرین کھل جائے گی (شکل 7)۔ وہاں آپ کو اپنی انگلی کے ناخن یا ایک سکے سے کھرچنے کے "بعد" سبز خوشبو کے ایریا میں اس خوشبو کو منتخب کرنا ہوگا جو آپ نے محسوس کی ہے (شکل 5)۔


پھر برائے مہربانی اسکرین کے نچلے حصے میں "تصدیق کریں" پر کلک کریں (شکل 7)۔



شکل 7

5.7 کوویڈ-19 سوالنامہ اسکرین

یہاں سات (7) سوالوں کا تمام کا سچائی کے ساتھ جواب دینا ہے (شکل 8)۔ صرف اس صورت میں جب آپ نے تمام سوالوں کے جواب ہاں یا نہیں میں دیئے ہیں اور اس کے مطابق سلائیڈر ایڈجسٹ کیا گیا ہے، تو آپ تصدیق پر کلک کر کے جاری رکھ سکتے ہیں۔

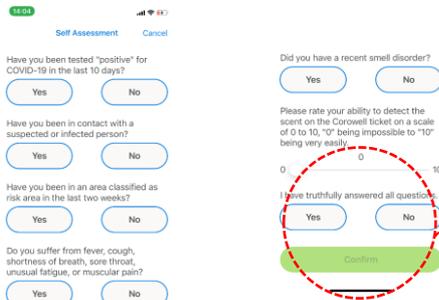

شکل 8

5.8 نام درج کریں اور ڈیٹا کی رازداری

Enter your name for the Corowell Pass:

e.g. Roberta Koch

Allowed characters are letters, numbers, space and hyphen character. The field cannot be empty.

Warning: You cannot change the name on your Corowell Pass after confirming.

Show Data Privacy Statement

I have read and understood this Data Privacy Statement.

I accept the terms of this Data Privacy Statement.

Confirm

آگے، اسکرین کھلتی ہے جیسا کہ شکل 9 میں دکھایا گیا، جہاں آپ کو اپنا نام لازمی درج کرنا ہوگا (یا اس شخص کا نام دینا ہوگا جس کا اصل میں ٹیسٹ کیا گیا ہے، جیسے آپ کے بچے)۔

یہ بہت اہم ہے کیونکہ بعد میں، جب آپ تیسرے فریق کی توثیق کے لئے اپنا کورویل پاس پیش کریں گے، تو آپ سے اپنی شناخت کی تصدیق کے لئے آپ کی آئی ڈی طلب کی جا سکتی ہے۔

شکل 9

آپ کو رازداری کی پالیسی کو بھی لازمی قبول کرنا ہوگا، جسے آپ کسی بھی وقت لنک (شکل 9) کے ذریعے یا ترتیبات میں تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔

5.9 Corowell پاس اسکرین




اگر آپ نے کورویل کوویڈ-19 علامت اسکریننگ ٹیسٹ "پاس" کر لیا ہے، تو کورویل پاس اسکرین (شکل 10) کھل جائے گی۔ یہاں آپ وہ نام دیکھیں گے کہ جو آپ نے پہلے داخل کیا ہے اور تاریخ اور وقت بھی جب آپ نے ٹیسٹ کیا تھا۔ اس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جب آپ کے کورویل پاس کو کسی تیسرے فریق کی طرف سے ٹیسٹ کیا جا رہا ہو، تو وقت اور تاریخ جس پر آپ نے پاس کیا اہم ہے۔

پوٹلز، ریستورانوں، ایئر لائنز، وغیرہ کے آپریٹر صرف ان کورویل پاسز کو قبول کریں گے جو 6، 12، 24، 48 یا 72 گھنٹے سے زیادہ وقت پہلے کے نہیں ہیں۔ قبولیت کے یہ معیار جگہ پر آپ کو بتائے جائیں گے۔

شکل 10


5.10 کورویل ناکام اسکرین

اگر آپ نے کورویل ٹیسٹ پاس نہیں کیا ہے، تو یہ اسکرین نمودار ہوگی۔ اگر آپ کا یہ تاثر ہے کہ آپ نے "صرف" کچھ غلط کیا ہے، تو آپ ہمیشہ نئے ٹکٹ کے ساتھ ٹیسٹ کو دہرا سکتے ہیں۔ اگر آپ واقعی میں سونگھ نہیں سکے ہیں، یا اگر آپ نے پہلے 5 سوالوں میں سے کسی ایک کے جواب میں ہاں یا آخری سوال کا کوئی جواب نہیں دیا ہے، تو ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ ممکنہ CoVID-19 انفیکشن کے لئے آپ کسی صحت کے پیشہ ورانہ فرد کے ذریعہ معائنہ کرائیں۔

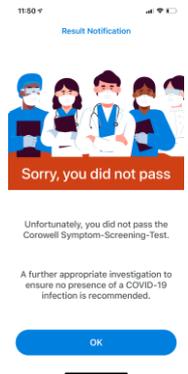

6 نقص کا پیغام "معذرت، ہم آپ کے ٹکٹ پر کارروائی کرنے سے قاصر ہیں"

یہ اسکرین (شکل 11) تب ظاہر ہوتی ہے، اگر آپ دوسری بار اپنا ٹکٹ استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اگر آپ کے پاس اصل کورویل ٹکٹ کی نقل ہے یا یہ جعلی ہے۔

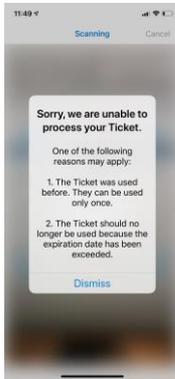


شکل 11

7 ترتیبات

ترتیبات میں (شکل 12)، آپ اس صارف دستی کتابچہ کو کھول سکتے ہیں اور عمومی سوالنامہ پڑھ سکتے ہیں۔

یہاں آپ کو رازداری کی پالیسی (آپ کی متعلقہ زبان میں) بھی مل جائے گی اور ہماری corowell.com ویب سائٹ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔

قطعہ آفیشل میڈیکل ڈیوائس "سے متعلق" میں ہماری مصنوعہ کے بارے میں معلومات ملے گی (شکل 13)۔

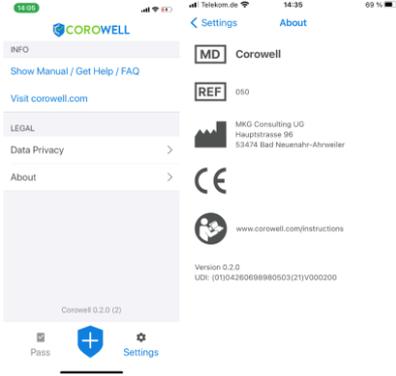

شکل 12

شکل 13

8 سروس اور وارنٹی

ہم آپ کو ایک جامع عالمی وارنٹی تحفظ کی پیشکش کرتے ہیں جو خریداری کی تاریخ سے لاگو ہوتی ہے۔ برائے مہربانی تفصیلات اور وارنٹی کی مدت کے لئے اپنے فروخت کار سے پوچھیں۔ یہ وارنٹی مواد اور/یا کاریگری میں تمام نقائص کا احاطہ کرتی ہے۔

وارنٹی میں غیر مناسب استعمال یا نگہداشت، کیمیکلز سے سامنا کرنا، پانی میں ڈبونا یا نامناسب نمائش کے نتیجے میں ہونے والے نقصان کا احاطہ نہیں کیا گیا ہے۔ تیسری پارٹیوں یا غیر مجاز خدمتی مراکز سے ہونے والے نقصان کی صورت میں وارنٹی غیر موثر ہوگی۔



مذکورہ معلومات میں مختلف علامتیں استعمال کی گئیں ہیں۔ ان میں ذیل میں وضاحت کی گئی ہے:

	طبی ڈیوائس
	حوالہ نمبر
	سیریل نمبر
	مینوفیکچرنگ تاریخ
	مینوفیکچرر
	خشک رکھیں
	واحد استعمال کی ڈیوائس
	سورج کی روشنی سے بچائیں
	درجہ حرارت کی حدود
	صارف کا کتابچہ دیکھیں
	تعمیل کا یورپین کمیونٹی مارک