



## Instrucciones de uso



Español

## Corowell Guard App

User Manual v1.0

MKG Consulting UG  
Hauptstraße 96  
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler  
Germany

Telefon: +49 2641 908 28 74  
E-Mail: info@corowell.com

## 1 Uso de la Guard App

La Corowell Guard App se utiliza para verificar y validar los pases electrónicos emitidos por la Corowell App mediante la lectura del código QR del pase electrónico.

## 2 Contraindicaciones

- Ninguna.

## 3 Instrucciones

Lea estas instrucciones antes de utilizar la Corowell Guard App por primera vez.

### 3.1 Advertencias

- Ninguna.

## 4 Precauciones

- Ninguna.

## 5 Funciones generales

La Corowell Guard App está diseñada para ayudar al usuario durante todos los procesos, de modo que este pueda verificar y validar satisfactoriamente los pases electrónicos emitidos por la Corowell App.

La Corowell Guard App (para iOS y Android) incluye las siguientes pantallas. La Figura 1 proporciona una descripción general de los componentes del sistema de test rápido de síntomas Corowell.

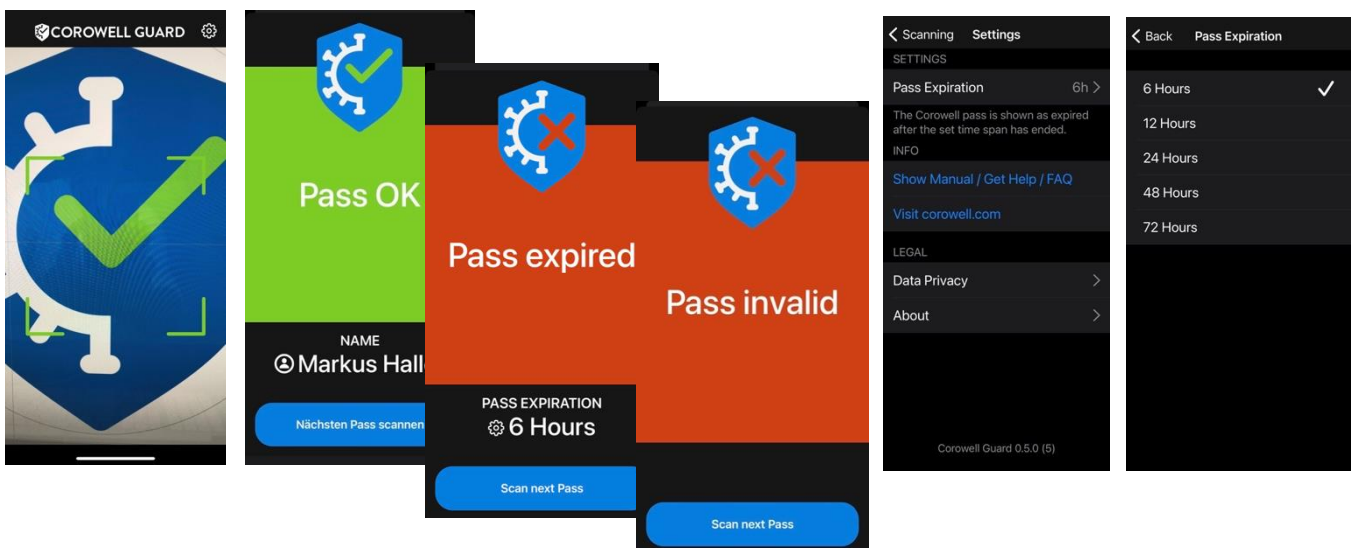


Figura 1 - Corowell Guard App Screens

## 6 Uso de Corowell Guard App

Los siguientes apartados describen en detalle el uso del sistema Corowell.

### 6.1 Pantalla de escaneo del pase electrónico

Cuando se abra la Corowell Guard App, el usuario deberá autorizar el «acceso a la cámara» para que esta se active de inmediato y escanee los pases Corowell.

Una vez escaneado un pase, la aplicación comprobará la validez y autenticidad del mismo y ofrecerá una de las 3 pantallas de «resultados» (véase a continuación, en la Figura 2a «Pase apto», Figura 2b «Pase vencido», con indicación de periodo de validez establecido, y Figura 2c «Pase no apto», que indica que un pase no es válido, es una copia o no es auténtico).

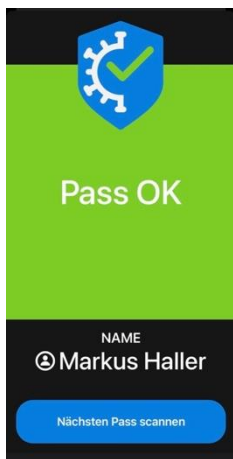


Figura 2a

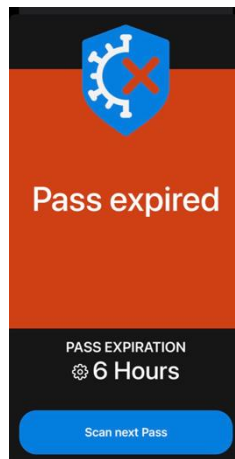


Figura 2b

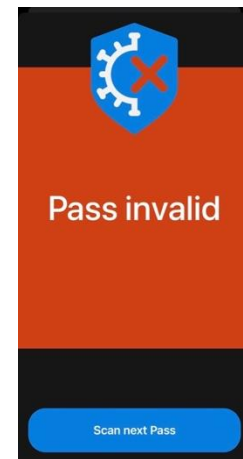


Figura 2c

### 6.2 Selección del idioma

La Corowell Guard App adoptará automáticamente el idioma seleccionado por defecto en los ajustes de su smartphone. Si en los ajustes de su smartphone ha seleccionado un idioma no disponible en la aplicación, el idioma que aparece por defecto será el inglés.

### 6.3 Ajustes

En los ajustes (Figura 3) podrá abrir estas instrucciones y leer asimismo las preguntas frecuentes.

Aquí también encontrará la declaración de protección de datos (en su idioma) y podrá acceder a la web [corowell.com](http://corowell.com).

En el campo «Acerca de...» del dispositivo médico oficial encontrará información de nuestro producto (Figura 3).

Podrá establecer asimismo el periodo de validez que considera aceptable antes de que el pase expire, a contar desde el momento en que el usuario haya obtenido su pase electrónico de Corowell.

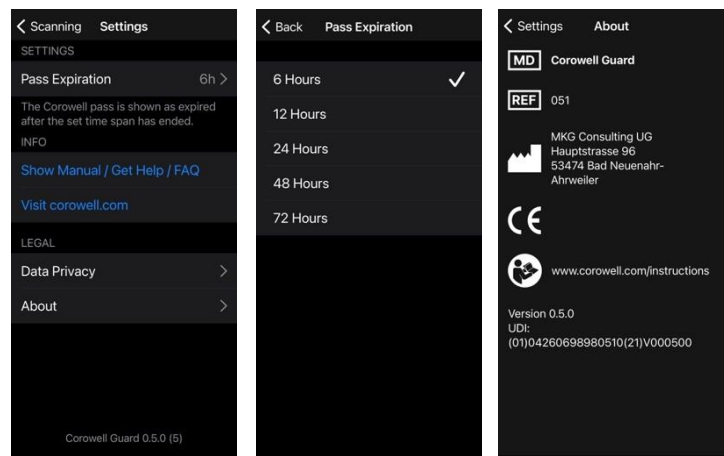










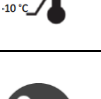


Figura 3

## 7 Asistencia y garantía

Nuestra garantía le ofrece una protección completa que entra en vigor a la fecha de su compra. Pida al vendedor que le informe de los detalles y del periodo de garantía. Esta garantía cubrirá todos los defectos de materiales y/o de mano de obra. La garantía no cubrirá los daños originados por un uso o cuidado inadecuados, la exposición a productos químicos, la inmersión en el agua o una exposición inadecuada. Los daños causados por terceros o por parte de centros de asistencia técnica no autorizados anularán dicha garantía.

## 8 Símbolos

Se utilizan los siguientes símbolos, que se explican a continuación en detalle.

	Producto sanitario, por sus siglas en inglés
	Número de referencia
	Número de serie
	Manufacturing Date
	Fabricante
	Manténgase en lugar seco
	Dispositivo de un solo uso
	Protéjase de la luz solar
	Restricciones de temperatura
	Véase el manual de instrucciones
	Marcado de conformidad europea